


Instrukcja Techniczna

4. Instrukcja techniczna

Urządzenie do infuzji tlenowej	1
Konfigurowanie urządzenia	2-3
Przed zabiegiem	4
Zabieg na twarz	5-6
Przygotowanie serum i aerografu	5-6
Krok 1/2 - Aerograf - Nakładanie serum	5-6
Krok 2/2 -In2OXY pen	7
Zabieg końcowy na twarz	7
Zabieg na twarz w domu	8
Zabieg na włosy i skórę głowy	9
Przygotowanie serum i aerografu	9
Zabieg aerografem i In2OXY Pen	9
Zabieg końcowy skóry głowy	10
Domowa pielęgnacja włosów i skóry głowy	10
Rozwiązywanie problemów	11
Czyszczenie i dostrajanie	12
Specyfikacje	13

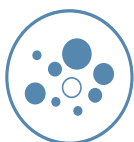

To jest instrukcja techniczna urządzenia do infuzji tlenowej, tutaj można znaleźć specyfikacje i szczegółowy opis użytkowania maszyny, funkcji, czyszczenia i bezpieczeństwa.

Urządzenie do infuzji tlenowej

W zestawie z urządzenie:

- Aerograf
- In2OXY pen
- 2 szt. wąż (3 m)
- 1 filtr powietrza
- Pojemnik na wilgoć z powietrza (nie używany do zabiegu kosmetycznego)
- Inhalator z zieloną rurką (nie używany do zabiegu kosmetycznego)

URZĄDZENIE DO INFUZJI TLENOWEJ

Ponieważ zalecamy używanie urządzenia do infuzji tlenowej wyłącznie do zabiegu dermaOXY, pojemnik nawilżacza powietrza i inhalator z zieloną rurką należy natychmiast schować. Jeśli aparat jest używany do tlenoterapii, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Dzieci, osoby chore psychicznie i niepełnosprawne mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.

Oto kilka instrukcji bezpieczeństwa dotyczących aparatu tlenowego:

- Powinien zawsze stać. Nie kłaść ani nie odwracać do góry nogami
- Nie wystawiać na działanie ekstremalnego ciepła, zimna lub wody
- Musi stać na podłodze w odległości co najmniej 10 cm od ściany lub mebli
- Nie przykrywać podczas użytkowania lub używania jako stół
- Otwory wentylacyjne nigdy nie powinny być blokowane
- Tylko upoważniony personel może otwierać urządzenie
- Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach ani pod prysznicem
- Zawsze bądź obecny, gdy urządzenie jest włączone
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji
- Nie używać z innym sprzętem niż opisany w niniejszej instrukcji
- Nie podłączaj do innych urządzeń tlenowych.


WAŻNE

- Surowo zabrania się palenia lub używania innych rodzajów ognia w pobliżu urządzenia do infuzji tlenowej. Tlen jest łatwopalny i może zapalić materiał łatwopalny oraz spowodować poważne szkody pożarowe u ludzi i mienia.
- Po uruchomieniu urządzenia pozostaw je włączone przez co najmniej 5 minut. Nie włączaj i wyłączaj w sposób ciągły, skraca to żywotność urządzenia.
- Zaleca się serwisowanie urządzenia 1 raz w roku. Skontaktuj się ze swoim dealerem i umów się na spotkanie.
- Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, na urządzenie do infuzji tlenowej może mieć wpływ częstotliwość radiowa (RF).

Urządzenie do infuzji tlenowej

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

- Zaczynij od sprawdzenia czy urządzenie nie jest uszkodzone
- Sprawdź czy nie ma zadrapań lub pęknięć;
 - 1 - Nasadka ochronna
 - 2 - Cyfrowy wyświetlacz
 - 3 - L/ min Miernik
 - 4 - Wylot tlenu
 - 5 - Wylot nebulizatora
 - 6 - Wł/Wył
- Podłącz i włącz maszynę przyciskiem 1/0 (6). Na wyświetlaczu cyfrowym (2) pojawi się teraz komunikat „Hello”, a po kilku sekundach rozpocznie się odliczanie czasu. Zwykle będzie ustawiony na kilka godzin, ponieważ wszystkie maszyny są testowane przed ich dystrybucją.
- Pozwól maszynie pracować przez około 10 minut.

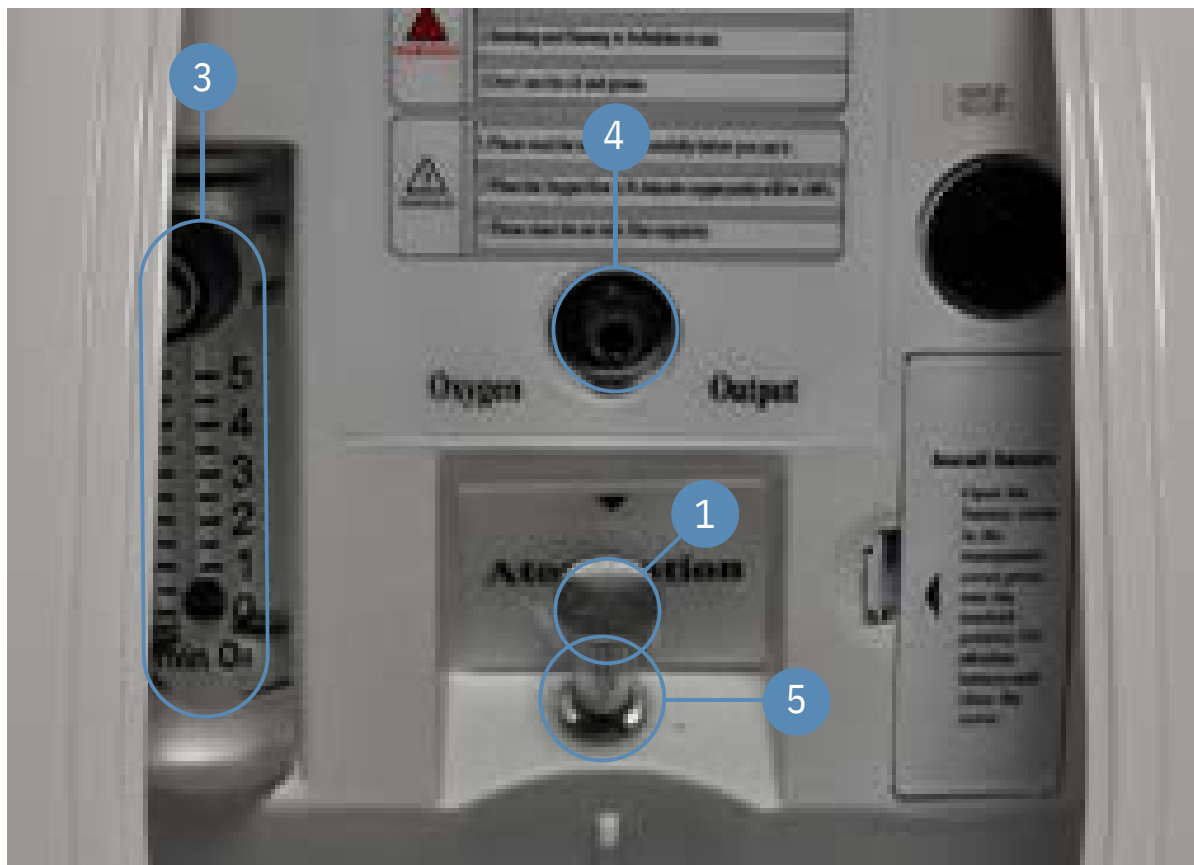

Konfiguracja

Spust aerografu

Upewnij się, że spust aerografu działa prawidłowo:

1. Kciukiem lekko pociągnij spust
2. Delikatnie pociągnij spust kciukiem, jednocześnie naciskając spust.

Jeśli przebiegnie to łatwo i bez problemów, aerograf jest gotowy do użycia.






Montaż węży

in2OXY pen:

- Nałóż jeden z dwóch węży na nakrętkę wężyka in2OXY (A)
- Ustaw wężyk in2OXY na WYLOT TLENU (4)

Natryskiwacz:

- Zdejmij nasadkę ochronną (1)
- Nałóż jeden z dwóch węży na nakrętkę wężyka aerografu (B)
- Ustaw wężyk aerografu na wylocie nebulizatora (5)

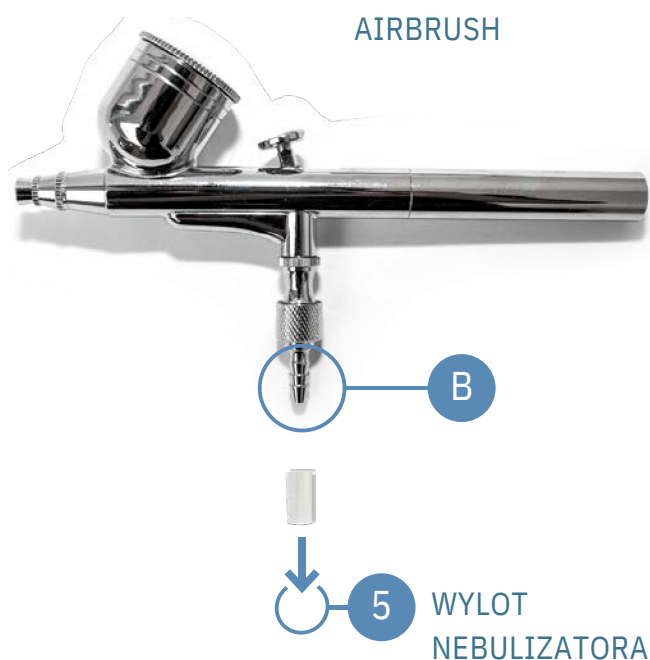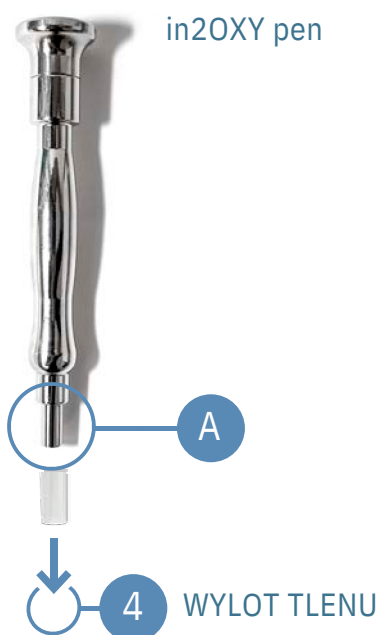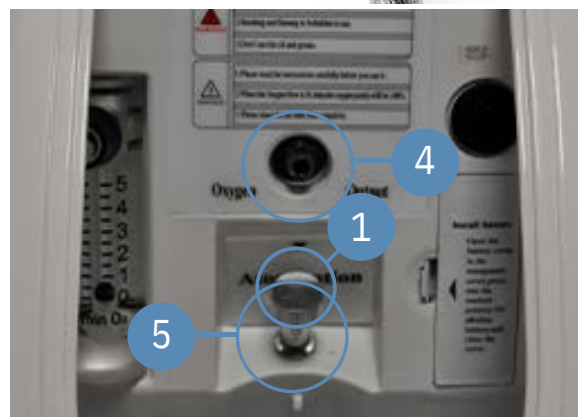

WYLOT TLENU I POWIETRZA (NEBULIZATOR)

Obydwa wyloty można wykorzystać podczas zabiegu aerografem - do aplikacji serum zalecamy najpierw użyć wylotu z nebulizatora, ponieważ ciśnienie przyczynia się do efektu penetracji. Następnie zamontuj in2OXY pen do wylotu tlenu w celu wmasowania nałożonego serum w skórę.

Aerograf może być również używany w wylocie tlenu do nakładania serum z podwyższoną zawartością tlenu oraz masażu tlenem (in2OXY pen).

Wylot nebulizatora:
Czyste powietrze pod ciśnieniem
Okolo 20% tlenu

Wylot tlenu:
Wysokie stężenie tlenu
Okolo 90% tlenu

Przed zabiegiem

Przed zabiegiem tlenem zaleca się wykonanie następujących czynności

1

Poinformuj klienta o procesie zabiegu infuzji tlenowej.

i

2

Użyj miernika wilgotności skóry i zmierz równowagę nawilżenia skóry. Trzymaj miernik wilgotności nieruchomo nad obszarem przez kilka sekund, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Wilgotnościomierz wyświetli teraz zmierzoną wartość na wyświetlaczu LCD.

3

Dokładnie oczyść skórę, nałóż Face wash - jeśli wykonujesz zabieg na skórę głową, umyj włosy szamponem dermaOXY.


4

Usuń martwy naskórek (peeling) - użyj peelingu dermaXY Exfoliating Scrub Peeling.

Zabieg na twarz

PRZYGOTOWANIE SERUM I AEROGRAFU

- Ważne jest, aby przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką serum.
- Zdejmij pokrywkę małego pojemnika na aerografie.
- Naciśnij pipetę na serum dermaOXY HYALURON lub serum dermaOXY SYN.
- Umieść pipetę nad pojemnikiem i wypchnij serum; należy to zrobić 2-3 razy.
- Umieść pokrywkę na pojemniku.
- Uruchom urządzenie. Sprawdź, czy licznik L/min jest na 5
- Wyceluj w rękę za pomocą aerografu. Pociągnij za spust aerografu w pozycji początkowej i poczuj, czy uwalnia się tlen/powietrze.
- Naciśnij i odciągnij, aby poczuć, czy serum jest uwalniane na wierzchu dłoni.
- Zwolnij spust.

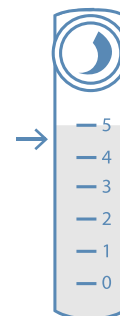


KROK 1/2 - AIRBRUSH - NAKŁADANIE SERUM


Zacznij od połowy twarzy i zacznij od szyi – zawsze zaczynaj od dołu do góry. Możesz także zacząć od obszarów, które uważasz za najbardziej potrzebujące, a następnie zacząć od szyi w górę, tak aby wymagające obszary były objęte zabiegiem 2 razy.

Naciśnij spust w początkowej pozycji i do tyłu, około 1-2 cm nad skórą, aby zobaczyć, jak skóra staje się wilgotna od serum. Odbywa się to tak, aby ciśnienie aerografu nie było szokiem dla klienta.

Następnie delikatnie przyłóż usta Aerografu do skóry klienta - 1-2 mm - w pozycji pionowej (około 90 stopni do skóry) - patrz ilustracja:

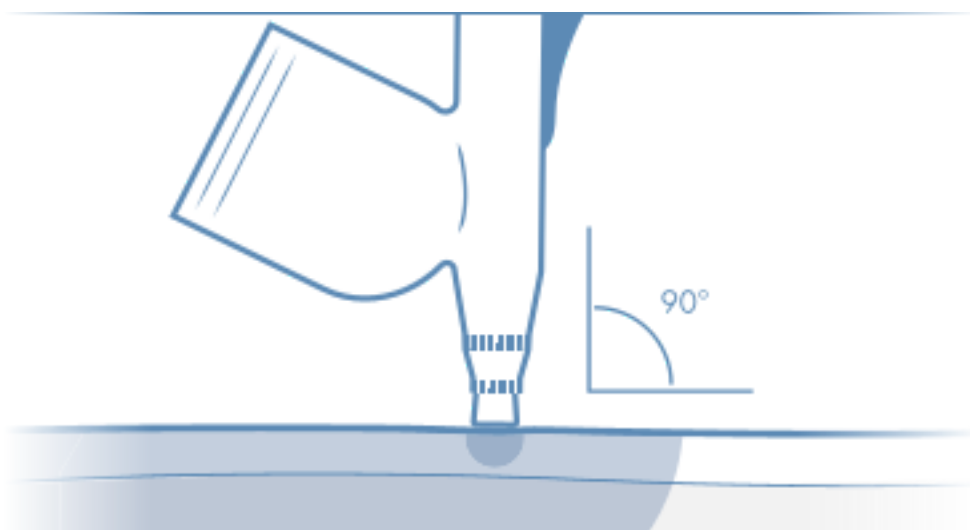

Zabieg na twarz

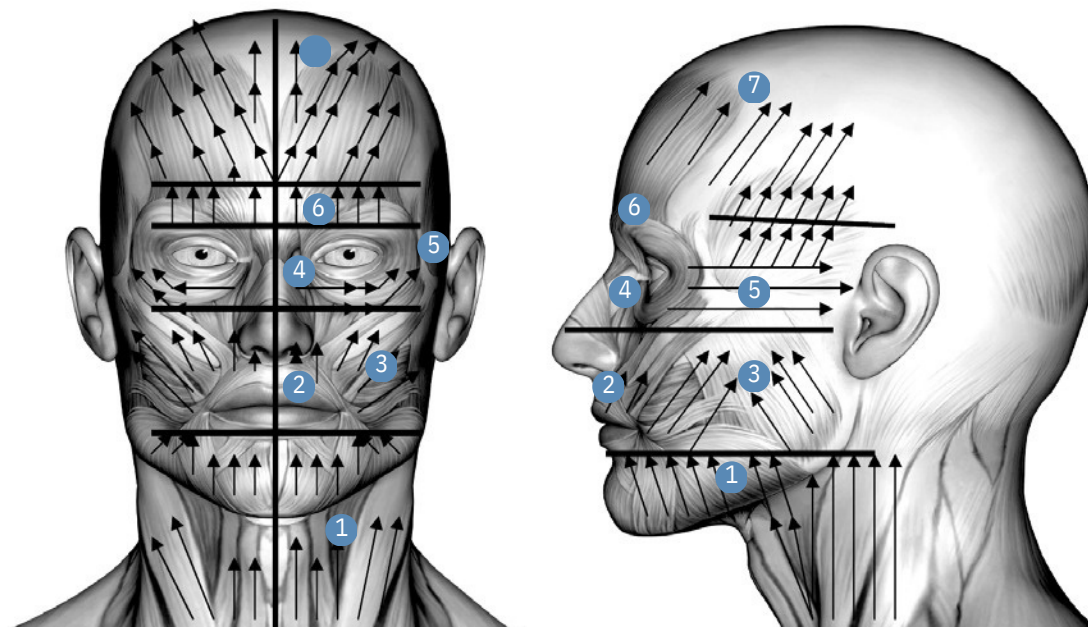

Obszar 1 - szyja, szczeka i podbródek

Wciśnij spust w pozycji początkowej i wykonuj każdy ruch powoli - zawsze od dołu do góry - postępuj zgodnie ze strzałkami na ilustracji i poruszaj się powoli około 1 cm na sekundę. Lekko podnieś pistolet ze skóry, obniżając go do podstawy. Powtarzaj ruch - zwykle 2-3 razy - aż serum wniknie w skórę. Podejście to ma zastosowanie do wszystkich obszarów.

Obszar 2 - nad wargą

Poproś klienta o zamknięcie ust. Celuj w linię ust i wykonuj małe, powolne ruchy w kierunku nosa. Do ust może dostać się trochę tlenu, który może wydawać dziwny dźwięk i trochę łaskotać.

Obszar 3 - policzki/kości policzkowe

Unieś/naciągnij skórę jedną ręką i przesunij aerograf w stronę kości policzkowej. Na zmarszczkach można następnie wykonywać małe okrężne ruchy za pomocą aerografu, jednocześnie napinając skórę. Policzki staną się pełniejsze i uniesione.

Obszar 4 - pod okiem

Poproś klienta, aby zamknął lekko oczy. Przesuwaj aerograf poziomo od nasady nosa tuż pod okiem w górę i poza oko.

Obszar 5 - obok oka/skroni

Podnieś / naciągnij skórę jedną ręką i przesunij aerograf z zewnętrznego kącika oka na zewnątrz i w górę. Ważne jest, aby podążać wzdłuż całej długości linii - czasami może to oznaczać, że musisz wyjść poza linię włosów. Na linii możesz następnie wykonywać małe okrężne ruchy za pomocą aerografu, jednocześnie napinając skórę. To bardzo ważny obszar - wykonaj więc kolejne dwa powolne ruchy.

Obszar 6 - brwi

Poproś klienta, aby bardzo delikatnie zamknął oczy. Unieś/naciągnij skórę jedną ręką tak, aby brew była uniesiona, podczas gdy aerograf wykonuje drobne ruchy. Oznacza to, że zwykle następuje natychmiastowe uniesienie brwi. Może się to wydawać zaskoczeniem zarówno dla klienta, jak i terapeuty.

Obszar 7 - czoło


Naciągnij skórę jedną ręką i postępuj zgodnie ze strzałkami na ilustracji. Na zmarszczkach można następnie wykonywać małe okrężne ruchy aerografem, jednocześnie napinając skórę.

Zabieg na twarz

Krok 2/2 - in2OXY pen

Zakończyliśmy kurację aerografem, skóra będzie teraz masowana in2OXY pen w celu zoptymalizowania efektu serum.

Krok 2 zabiegu za pomocą in2OXY pen jest wykonywany w tej samej kolejności i kierunku, co krok 1 –od dołu do góry – patrz ilustracja na poprzedniej stronie.

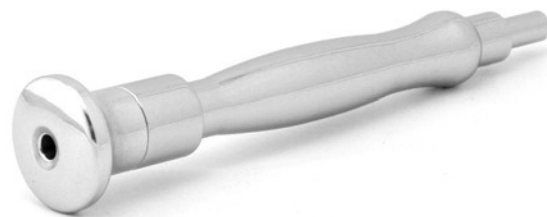

in2OXY pen - Oxygen outlet

Półowa twarzy jest teraz objęta zabiegiem. Pozwól klientowi zobaczyć różnicę w lustrze, zanim przejdzie do porównania z drugą połową twarzy. Teraz sprawdź, czy są obszary, które wymagają zabiegu.

Główne obszary to:

- Między oczami (m. procerus)
- Wokół oczu (m. orbicularisoculi p. orbitalis)
- Obok oczu (m, auricularis)
- Powyżej i poniżej ust (m. orbicularisoris)
- Ponad kością policzkową (m. levatorlabialisuperius, m. zygomaticus minor, m. zygomaticus major)

Jeśli zostało więcej serum, rozprowadź resztę na najważniejszych miejscach i pozwól się wchłonać. Nie wycieraj nadmiaru serum.

ZABIEG KOŃCOWY TWARZY

Zakończ nakładając cienką warstwę dermaOXY HYDRA na twarz, a następnie krem dermaOXY EYE i dermaOXY DAY.

Poproś klienta, aby poczuł, jak pulchne stały się policzki, jak bardzo nawilżyły się i odzyskały elastyczność skóry. Jeśli przed zabiegiem wykonałeś test miernikiem wilgotności skóry, możesz teraz wykonać nowy pomiar i porównać poziomy nawilżenia.

Zaleca się stosowanie 6-tygodniowego planu kuracji - jeden zabieg tygodniowo przez 6 tygodni. Niektórym wystarczą 4 zabiegi, innym może wystarczyć nawet 12-tygodniowy okres kuracji. Następnie zaleca się, aby klient wykonywał zabieg co miesiąc lub co drugi miesiąc.

Pamiętaj, aby po użyciu wyczyścić aerograf i in2OXY pen.

Zabieg na twarz

Zabieg na twarz w domu

Poradź klientowi, jak stosować produkty pielęgnacyjne dermaOXY do codziennego użytku.

Rano

Umyj twarz - za pomocą dermaOXY Facewash.



EYE CREAM

Zaczynj od kremu pod oczy. Użyj tylko niewielkiej ilości.
Nakładać od kości oczodołu ruchem na zewnątrz.



HYDRA CREAM

Następnie nałóż cieką warstwę HYDRY na całą twarz.



DAY CREAM

Na koniec nałóż ochronny i odżywczy krem na DZIEŃ

Wieczór

Umyj twarz za pomocą FACEWASH. Zaleca się stosowanie peelingu dermaOXY Exfoliating Scrub Peeling 1-2 razy na tydzień - usuwa zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka.



EYE CREAM

Nakładać od kości oczodołu ruchem na zewnątrz.
Użyj tylko niewielkiej ilości.



HYDRA CREAM lub INTENSIVE SERUM

Następnie nałóż cieką warstwę kremu HYDRA lub INTENSIVE serum na twarz.




NIGHT CREAM

Następnie nałóż odżywczy i kolagenotwórczy krem na noc.

Zabieg na włosy i skórę głowy

Przygotowanie serum i aerografu


- Ważne jest, aby przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką serum.
- Zdejmij pokrywkę małego pojemnika na aerografie
- Naciśnij pipetą na serum dermaOXY HYALURONIC lub serum dermaOXY SYN.
- Umieść pipetę nad pojemnikiem i wyciśnij serum. Należy to zrobić 2-3 razy.
- Umieść pokrywkę na pojemniku z serum.
- Uruchom urządzenie. Sprawdź, czy licznik L/min jest ustawiony na 5.
- Wyceluj w rękę za pomocą aerografu. Pociągnij za spust na aerografie w pozycji wyjściowej, czy czuć, czy tlen/powietrze.
- Naciśnij i pociągnij do tyłu i sprawdź, czy serum jest uwalniane.
- Zwolnij spust.
- Celuj w skórę głowy klienta, naciśnij i ponownie naciśnij spust, rozprowadź serum pod ciśnieniem na całą skórę głowy.

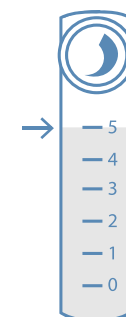

Zabieg aerografem i pen in2OXY

Naciśnij spust w początkowej pozycji i podążaj za strzałkami dwa razy jedna po drugiej, powoli, około 1 cm na sekundę. Po drugie - aż do skóry głowy klienta, aż do opracowania całego obszaru 1. Powtórz 3-5 razy, jeśli skóra jest bardzo sucha i ma łupież.

Jeśli na skórze głowy nie ma wystarczającej ilości serum, naciśnij spust i odciągnij. Kontynuuj do obszaru 2 i kontynuuj przez 8. Zobacz. Rysunek.

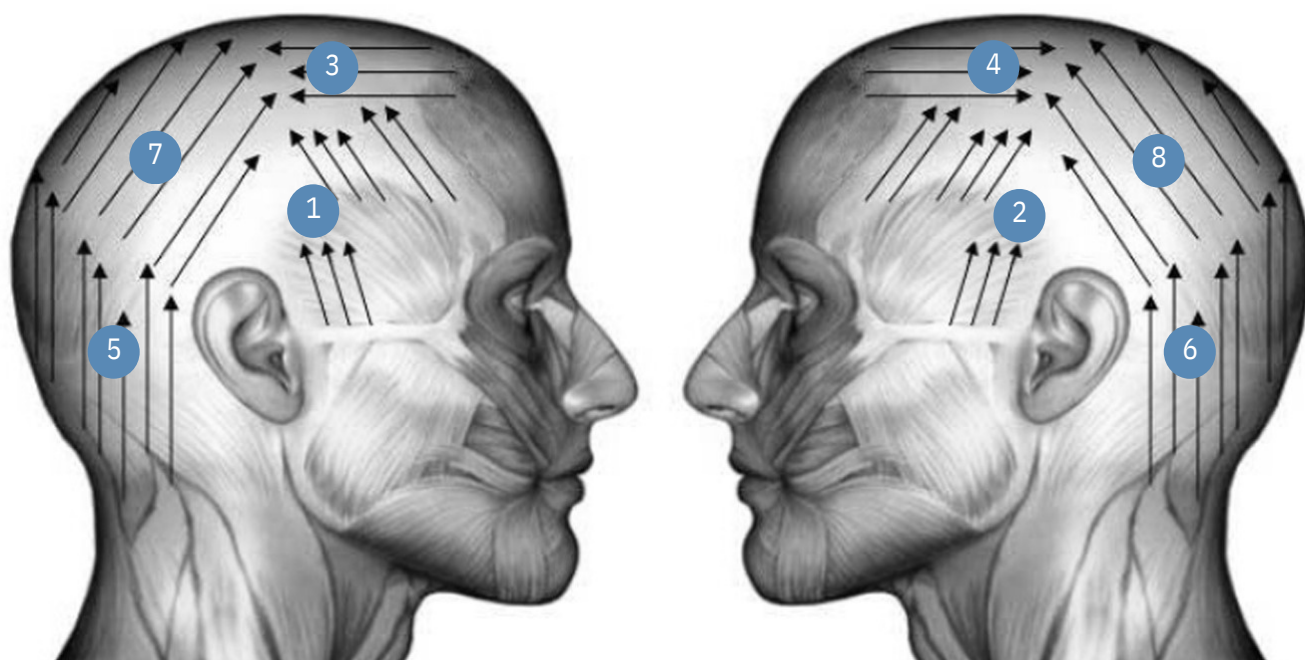

Zabieg na włosy i skórę głowy

Kuracja końcowa skóry głowy

Jeśli pozostało więcej serum, skorzystaj z reszty w głównych obszarach (sucha i łuszcząca się skóra głowy) i pozwól temu wchłonać.

Jeśli masz miernik wilgotności skóry, wykonaj pomiar przed i po. Normalnie wilgotność wzrosłaby o około 10% po pierwszym zabiegu. Jeśli masz analizator skóry, możesz zrobić specjalne zdjęcia przed i po oraz śledzić skórę głowy/włosy we wszystkich fazach.

Twój dystrybutor dermaOXY może otrzymać te specjalne instrumenty, ale nie są one koniecznością. Klient musi wykonać swoją część do następnego zabiegu tydzień później. Patrz punkt 7 „Po zabiegu na włosach”.

Klient musi poddać się 6 zabiegom. Jeden zabieg tygodniowo przez sześć tygodni. Niektórzy zadowoleni są z czterech zabiegów, a inni mogą potrzebować nawet osiem zabiegów. Następnie zaleca się, aby klient poddawał się zabiegowi co miesiąc lub co drugi miesiąc.

Domowa pielęgnacja włosów i skóry głowy



- SHAMPOO

Take the equivalent of one teaspoon of shampoo, massage it well into the hair and rinse. Repeat this once more. Wash hair every other day.



- HAIR TONIC

Take the equivalent one teaspoonful tonic in towel-dried hair or dry hair. Massage into hair and scalp. Do not rinse. Use tonic every other day.

DermaOXY produce shampoo and Hair Tonic, there are tried and tested. Like the other products, they are also completely free of parabens and allergens.

Pamiętaj, aby po użyciu wyczyścić aerograf i pen IN2OXY.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nadal będzie wydobywał się tlen z aerografu, mimo że zwolniłeś spust;

- A. Uszkodzony O-ring – można go kupić u sprzedawcy
- B. Igła aerografu musi być wyregulowana - patrz „Dokładna regulacja* na stronie 14, dot. Igła (2)

- Jeśli klient odczuwa dyskomfort: przerwać zabieg. W produktach nie ma alergenów ani parabenów, ale u niektórych pacjentów może wystąpić reakcja.
- W przypadku dostania się produktu do oka: przemyć oko zimną wodą.
- Jeśli w aparacie włączy się alarm: przerwij zabieg i uruchom ponownie aparat. Jeśli alarm włączy się ponownie, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Jeśli urządzenie wydaje wysoki dźwięk:


- Jeśli urządzenie wydaje wysoki dźwięk, wypróbuj jedną z następujących opcji, aby znaleźć błąd:
- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone
- Sprawdź, czy gniazdko jest włączone
- Sprawdź, czy Airbrush lub in20XYpen jest zatrzymany
- Zdejmij obie obudowy z przodu urządzenia

Czyszczenie i dostrajanie

Czyszczenie aerografu

Zagotuj trochę wody i wlej ją do małego pojemnika. Włącz maszynę. Napętnij aerograf wrzącą wodą i wydmuchaj wodę w taki sam sposób, jak gdyby to było serum. Następnie trzymaj serwetkę w kierunku końcówki i dmuchnij ponownie. Spowoduje to wydmuchanie bąbelków i uwolnienie wszelkich małych cząstek pozostałości serum.

Powtarza się to przez jakiś czas, po czym ta sama procedura jest przeprowadzana z powietrzem, aby opróżnić aerograf. Zakręć końcówkę (1) i wyczyść alkoholem lub innym płynem dezynfekującym, aby usunąć wszelkie pozostałości serum. Delikatnie przetrzyj igłę (2), uważając, aby jej końcówka się nie złamała ani nie wygięła. Zakręć z powrotem nakrętkę. Teraz aerograf jest ponownie gotowy do użycia.

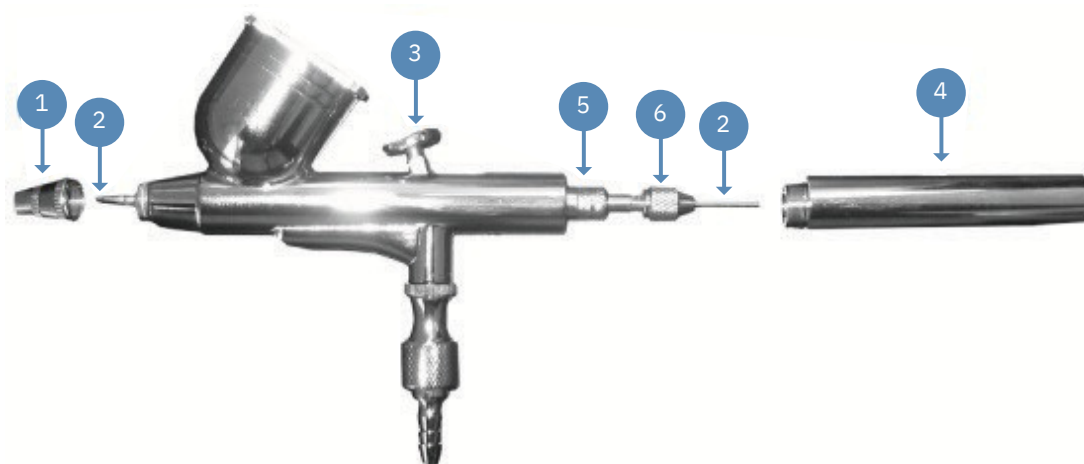

Dostrojenie

Jeśli wystąpią problemy, może być konieczne drobne dostrojenie. Odbywa się to w następujący sposób:

- 1 Odkręć końcówkę (1) aerografu - cienka igła (2) musi wystawać kilka milimetrów z aerografu. Pociągnij spust (3) w dół i do tyłu; Igła znika w aerografie. Jeśli nie, odkręć tylną część aerografu (4),
- 2 Poluzuj przednią nakrętkę rowkowaną (5), a następnie tylną (6). Cienka igła (2) może się teraz swobodnie przesuwac. Lekko obróć igłę między palcami, aby upewnić się, że jest swobodna.
- 3 Teraz lekko popchnij igłę (2), aż aerograf stanie się widoczny. Teraz ponownie dokręć obie nakrętki, dzięki czemu igła zablokuje się w swojej pozycji.
- 4 Teraz sprawdź, czy igła znika w aerografie, gdy spust (3) jest naciskany w dół i do tyłu. Teraz tylna zaślepka (4) jest ponownie zakręcona i aerograf jest gotowy do użycia.

Specyfikacje

- Zakres ciśnienia: 1-5 l/min.
- Stężenie tlenu: 95,5% -87%
- Maksymalne ciśnienie wylotowe: 45 Pa +/- 4,5kPa (6,52 psi +/- 0,65 psi)
- Roboczy mechanizm odciążający: 250kPa +/- 25kPa
- (36,25 psi +/-3,63 psi)
- Wysokość: do 1828 m n.p.m. bez degradacji poziomów koncentracji. Od 1828 metrów do 4000 metrów poniżej 90% sprawności.
- Poziom hałasu: <55dB (A)
- Maks. szybkość nebulizacji:> 0,2 l/min.
- Zasilanie: AC 220 V +/- 10%; 50Hz
- Moc wejściowa: <600 VA
- Waga 26 kg
- Wymiary: 44,5 cm wys. x szer. 37,2 cm gł. x 68 cm - Parametry elektryczne: typ II klasy B
- Znak CE, zatwierdzony przez EC
- 2 lata gwarancji