



Instrukcja obsługi




Wprowadzenie




Wprowadzenie




Instalacja

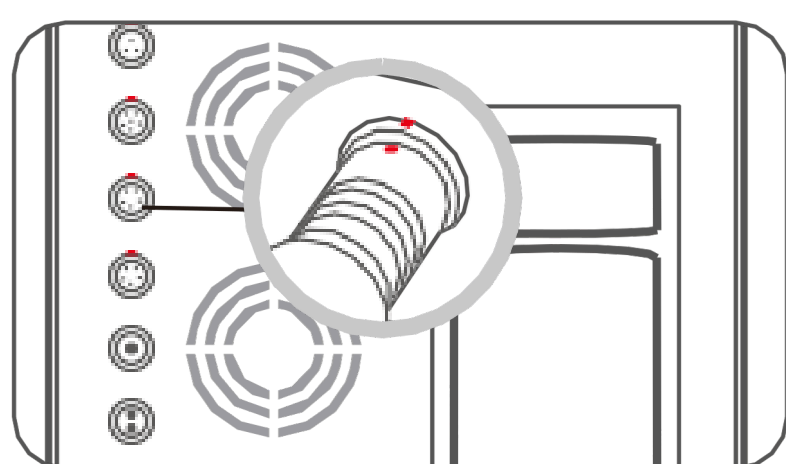


Upewnij się, że wszystkie głowice są prawidłowo podłączone zgodnie z naklejką informacyjną na tylnej stronie urządzenia, a następnie uruchom urządzenie, aby wejść na stronę ustawień.

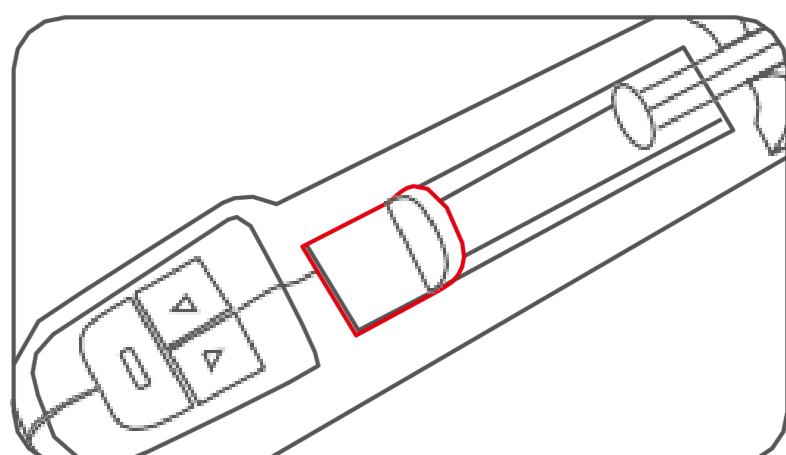


Przed włożeniem strzykawki naciśnij przycisk cofania, aby zrobić wystarczającą odległość na umieszczenie strzykawki.

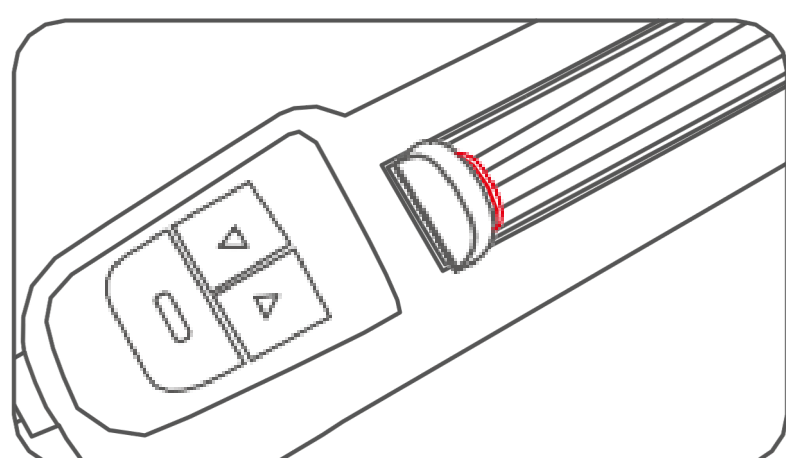

Naciśnij przycisk przesuwania do przodu, aby niebieska część dotarła do strzykawki. Sprawdź zawartość strzykawki, aby upewnić się, że nie ma w niej powietrza.

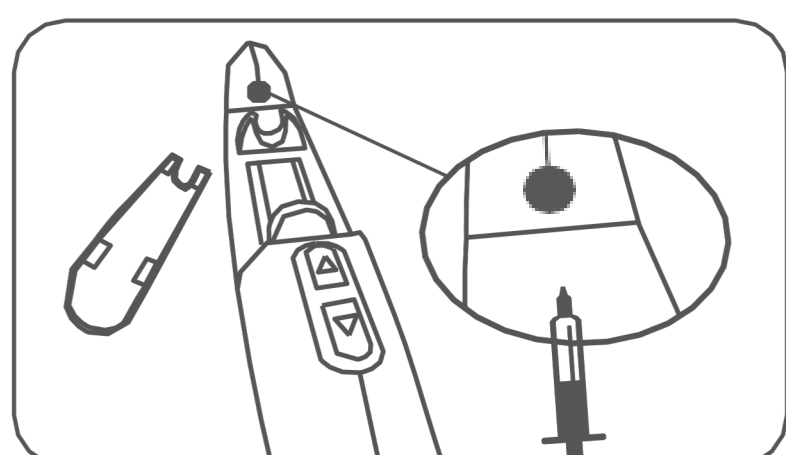


Wsuń strzykawkę w mały otwór i pewnie umieść ją w głowicy.

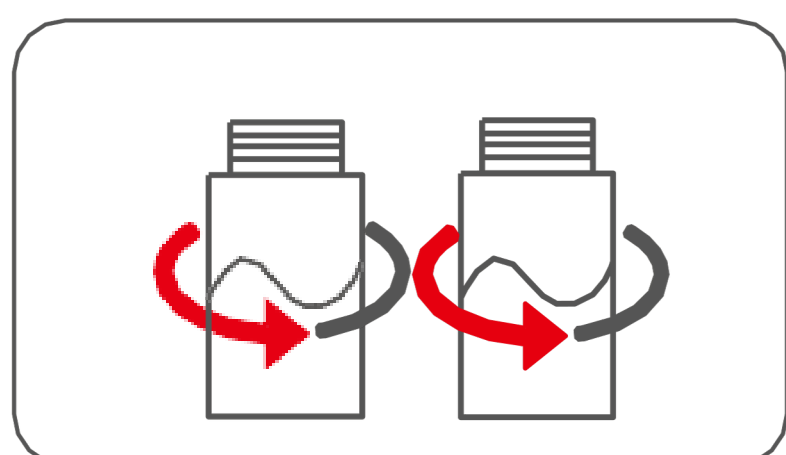


Należy pamiętać, że butelka ABC i butelka na zużyty preparat powinny być dobrze dokręcone, w przeciwnym razie głowica do oczyszczania nie będzie miała ssania. Należy pamiętać o opróżnianiu butelki na zużyty preparat.


Konserwacja

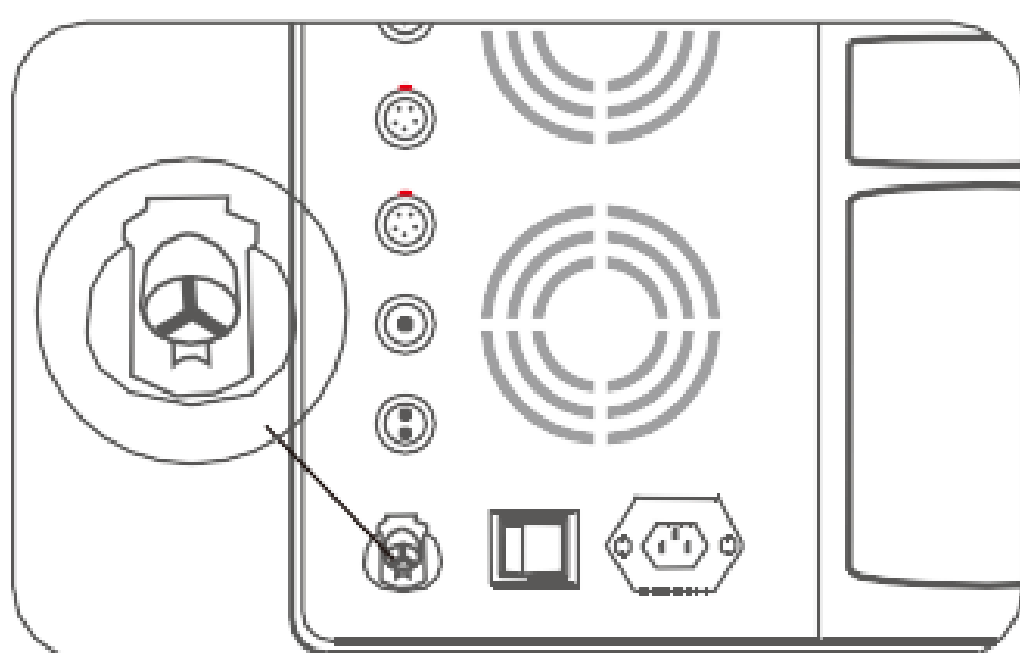

Za każdym razem, po skorzystaniu z głowicy do mezoterapii, należy odpowietrzyć mały otwór w lewym dolnym rogu tylnej części urządzenia.

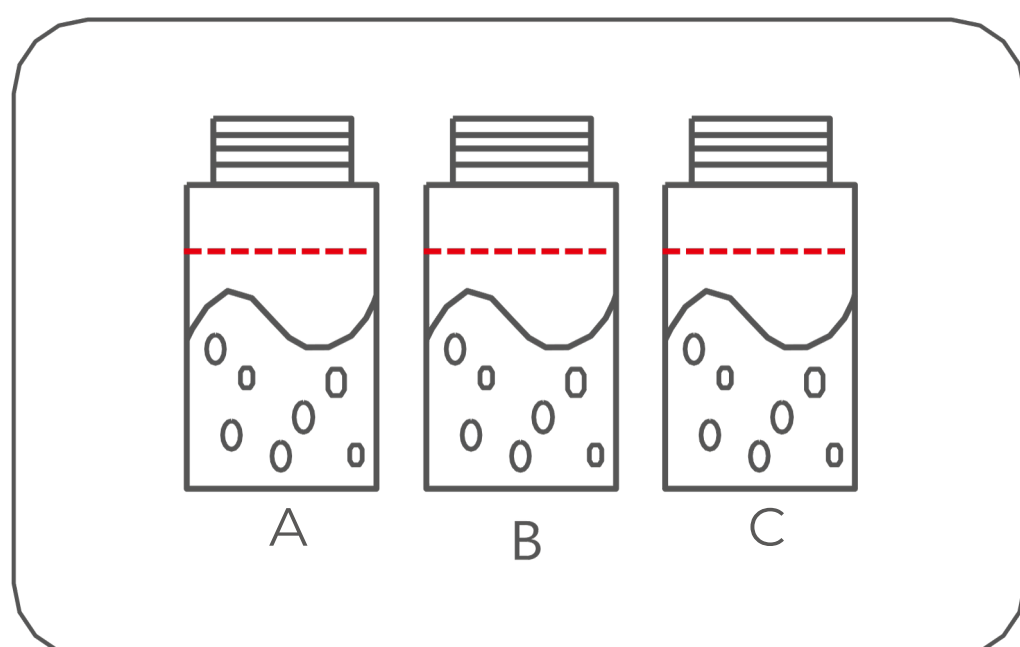

Butelkę ABC należy napełnić tylko do 1/3 pojemności preparatem.

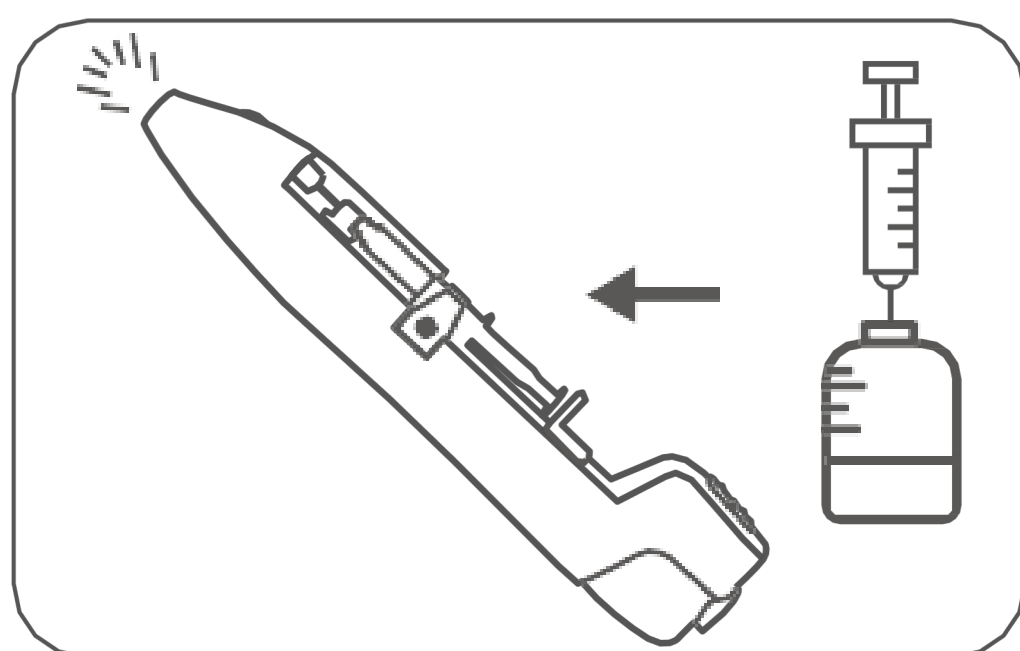

Po zakończeniu zabiegu głowicą do mezoterapii natychmiast napełnij ją 2 ml roztworu soli fizjologicznej i kilkakrotnie przepłucz (ustaw prędkość na 0,3 s, aby zmaksymalizować ilość płynu, a następnie naciśnij normalny start, aby przepłukać pozostały płyn w strzykawce i zapobiec zablokowaniu głowicy).

Proces obsługi

Po włączeniu urządzenia uruchomi się ekran startowy.



Proces obsługi




Środki ostrożności przed zabiegiem:


1. Przed przystąpieniem do zabiegu zdezynfekuj wszystkie głowice.
2. Zdezynfekuj dłonie.
3. Przygotuj skórę klienta, wykonaj demakijaż.

Interfejs operacyjny

Krok pierwszy:

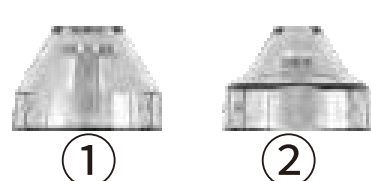

Vortex -
oczyszczanie
wodorowe

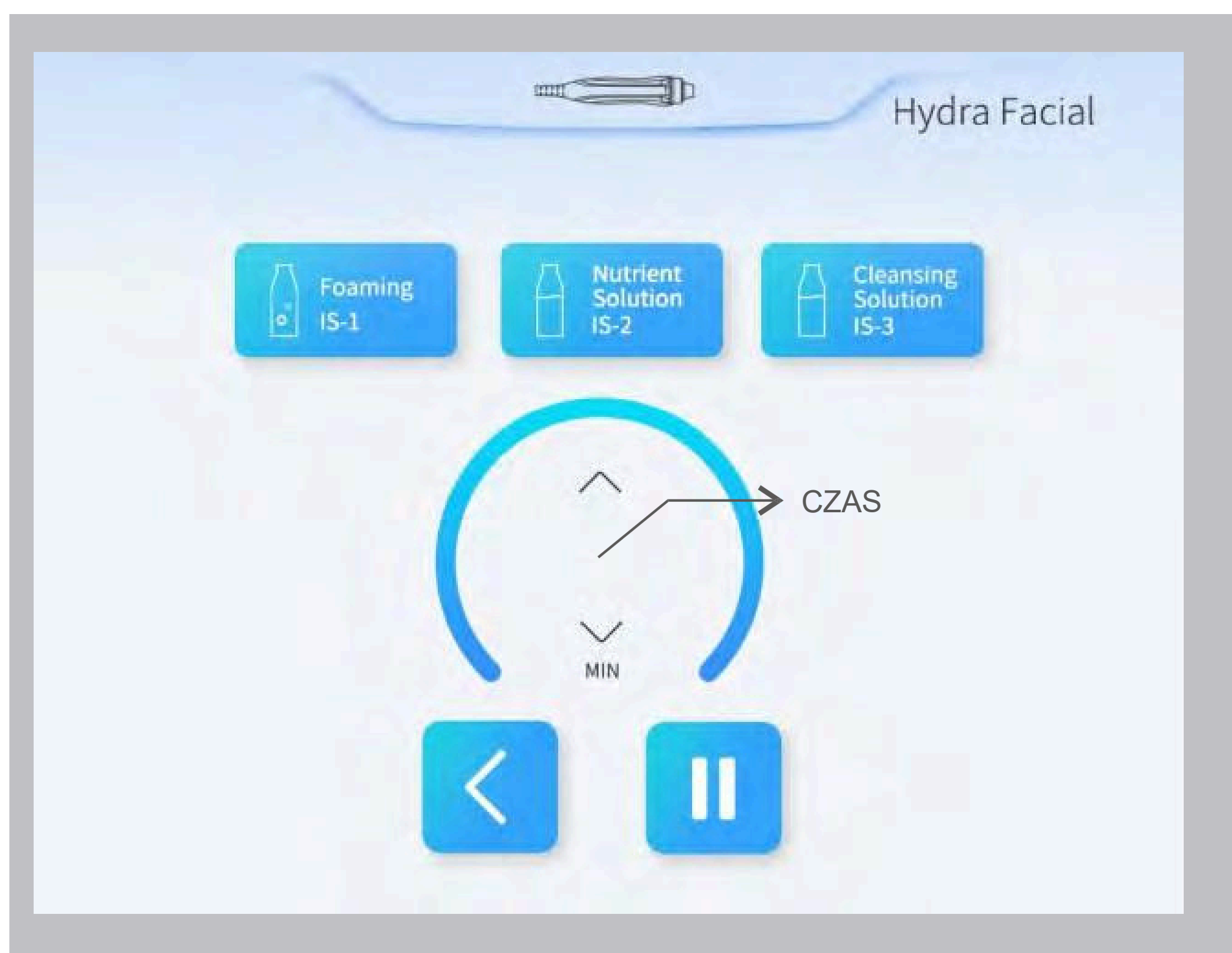

Procedura działania:


1. Na panelu sterowania wybierz odpowiednią głowicę.
2. Wybierz odpowiedni krok zabiegu:
 - S1 - roztwór oczyszczający
 - S2 - roztwór złuszczący
 - S3 - roztwór detoksykujący
3. Pokrętłami dostosuj odpowiednio podaż roztworu oraz moc ssania.

Interfejs operacyjny

Krok drugi:



Peeling kawitacyjny

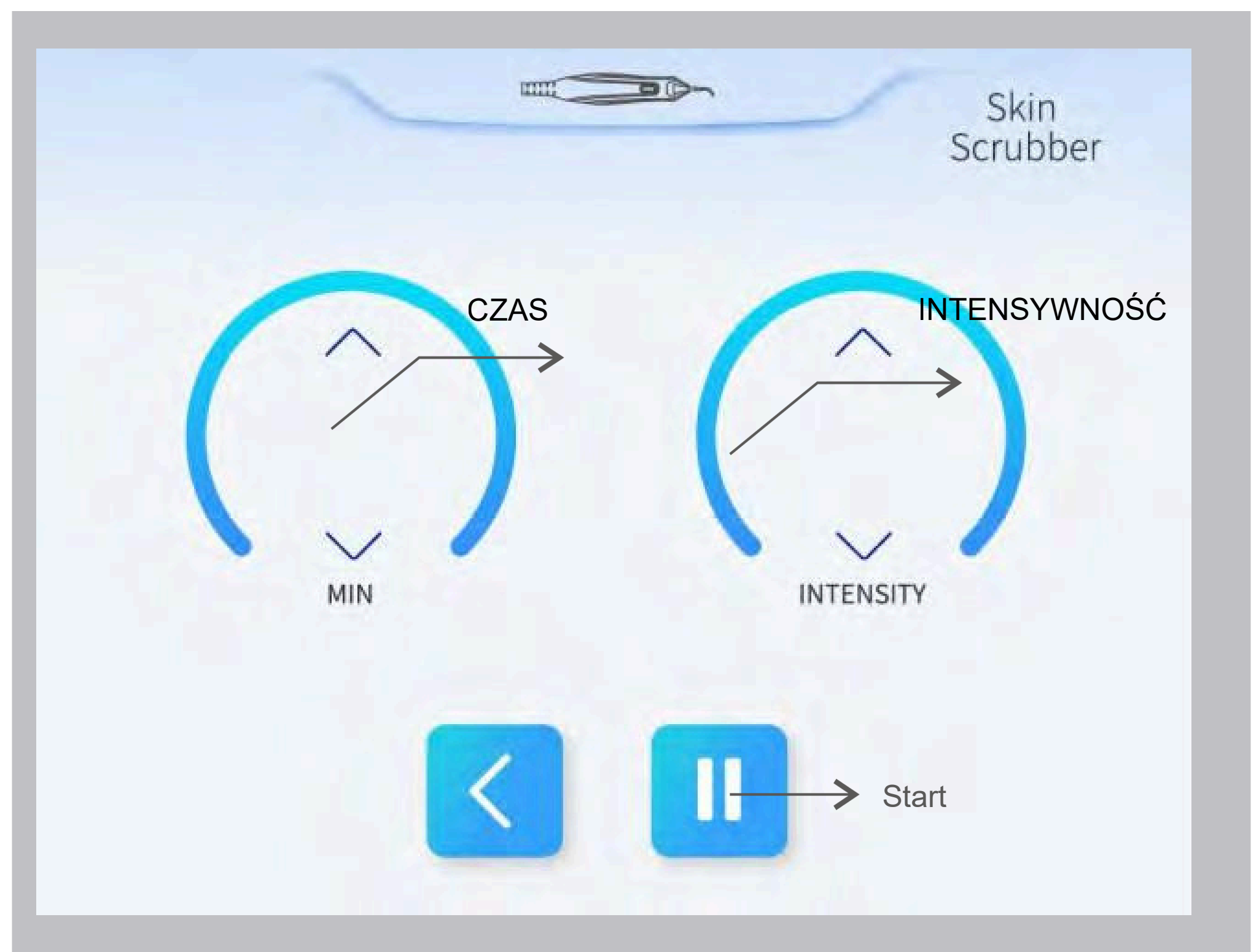

Procedura działania:


1. Na panelu sterowania wybierz odpowiednią głowicę.
2. Strzałkami w górę i w dół dostosuj czas zabiegu oraz intensywność drgań.

Interfejs operacyjny

Krok trzeci:



Głowica RF

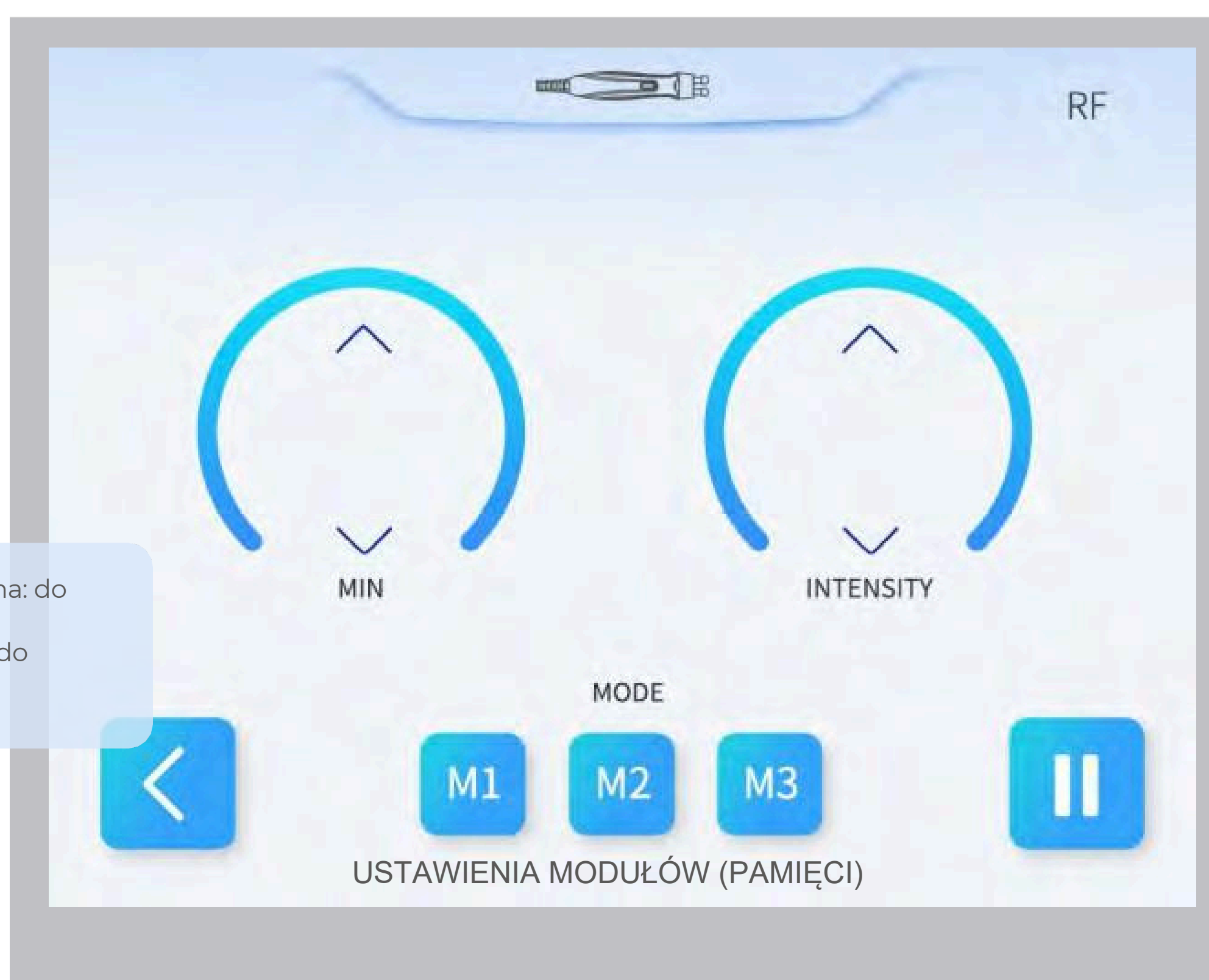

Procedura działania:


1. Na panelu sterowania wybierz odpowiednią głowicę.
2. Strzałkami w górę i w dół dostosuj czas i intensywność fali radiowej do obszaru zabiegowego.
3. Nałóż równomiernie preparat na twarz.
4. Głowica bipolarna jest używana wraz z preparatami do okolic oczu. Delikatnie przesuwaj ją od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego. Zalecany czas zabiegu oczu: 3–5 minut.

Interfejs operacyjny

Krok czwarty:



Mezoterapia
wysokociśnieniowa

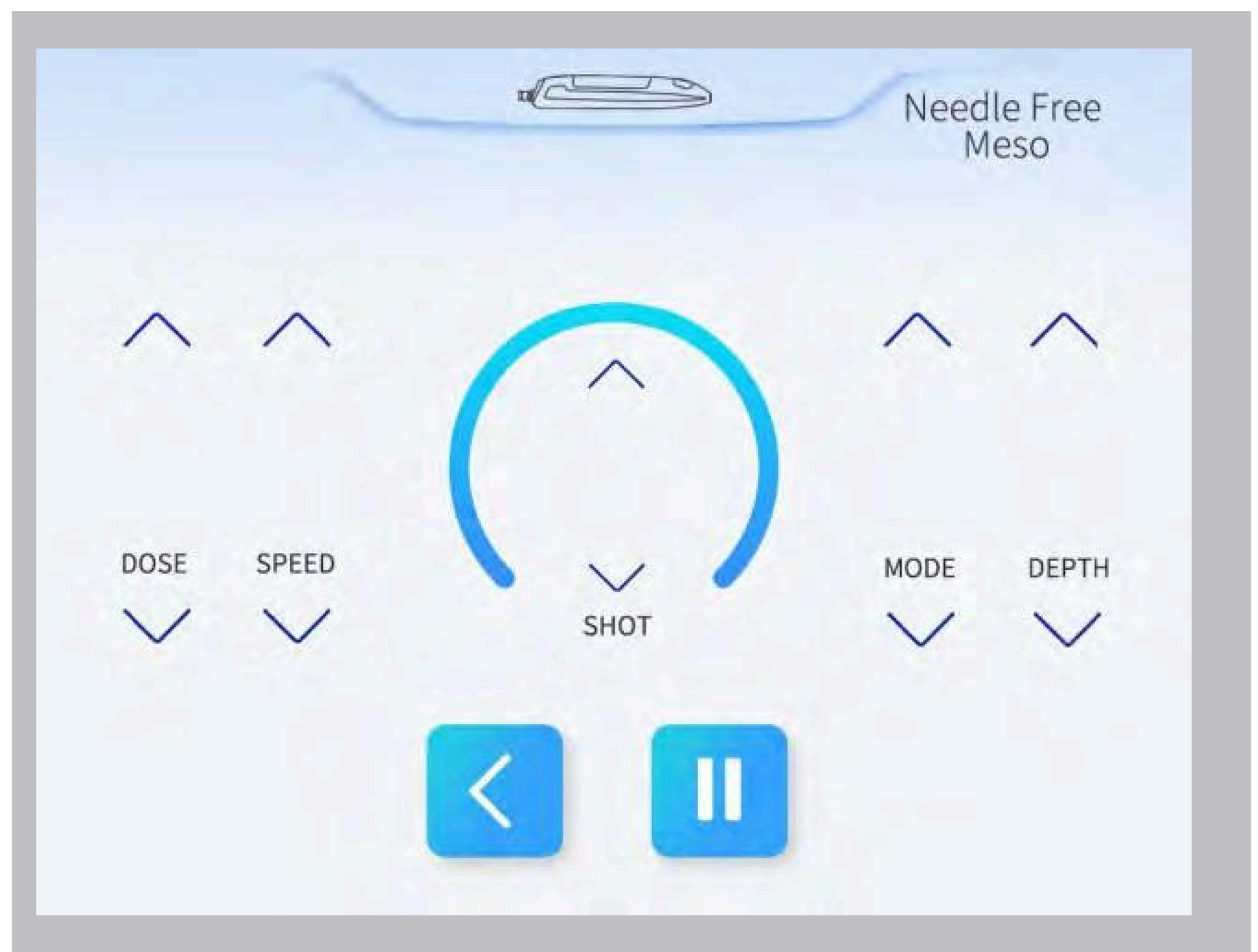

Procedura działania:


1. Na panelu sterowania wybierz odpowiednią głowicę.
2. Napełnij strzykawkę (2ml) preparatem pielęgnującym o rzadkiej konsystencji.
3. Na ekranie dotykowym strzałkami w górę i w dół dostosuj odpowiednio: dozowanie preparatu, szybkość podania preparatu, sposób podania preparatu (aut, manual), moc podania.
4. Na środku panelu przedstawiona jest ilość strzałów (będzie ona zmienna w zależności od ustawień).

Interfejs operacyjny

Krok piąty:



Głowica
ultradźwiękowa

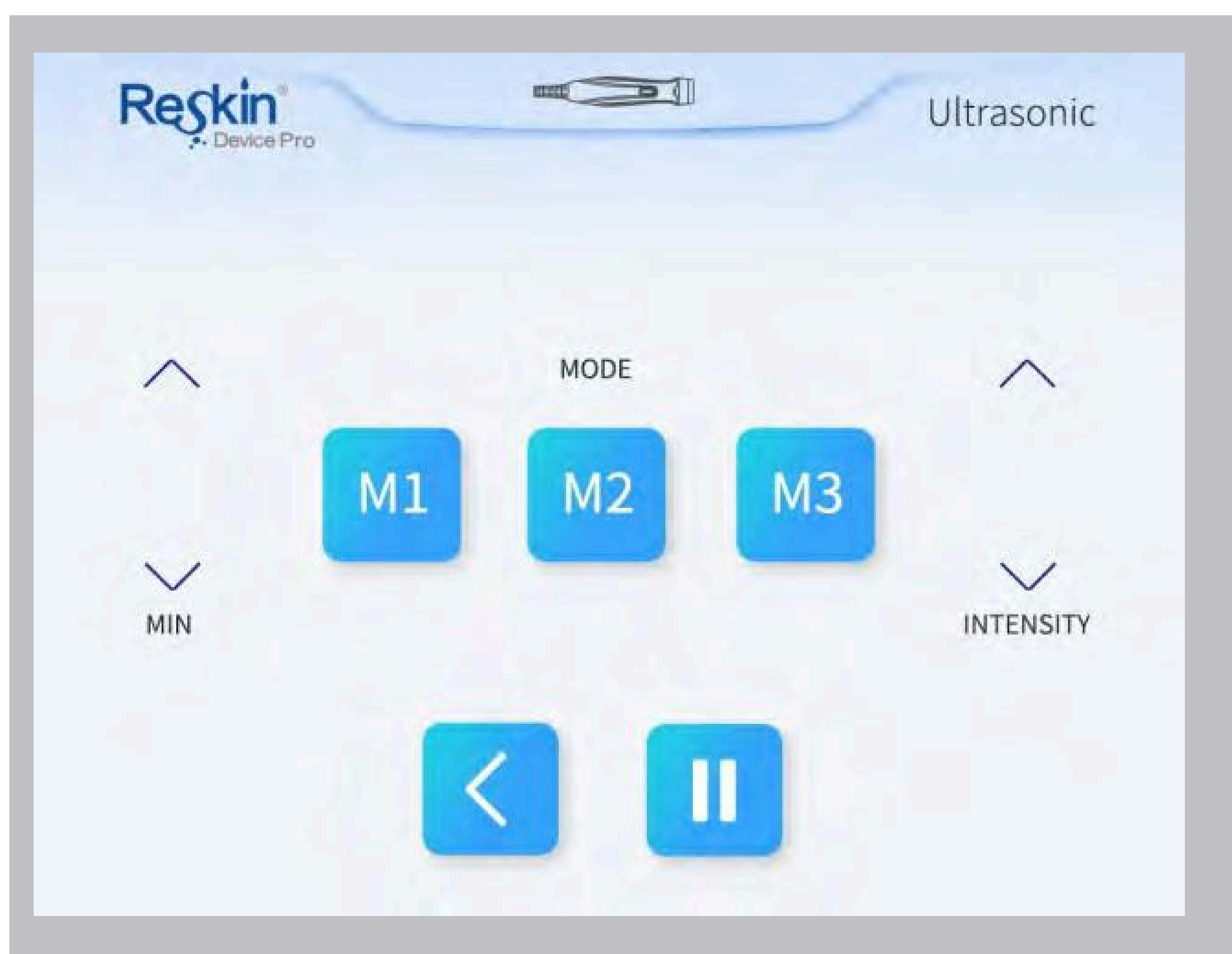

Procedura działania:


1. Na panelu sterowania wybierz odpowiednią głowicę.
2. Strzałkami w górę i w dół dostosuj czas zabiegu oraz intensywność drgań.
3. Nałóż serum na skórę i wprowadź je ultradźwiękami prowadząc głowice po skórze

Interfejs operacyjny

Krok szósty:



Głowica
chłodząca
tzw. zimny młotek

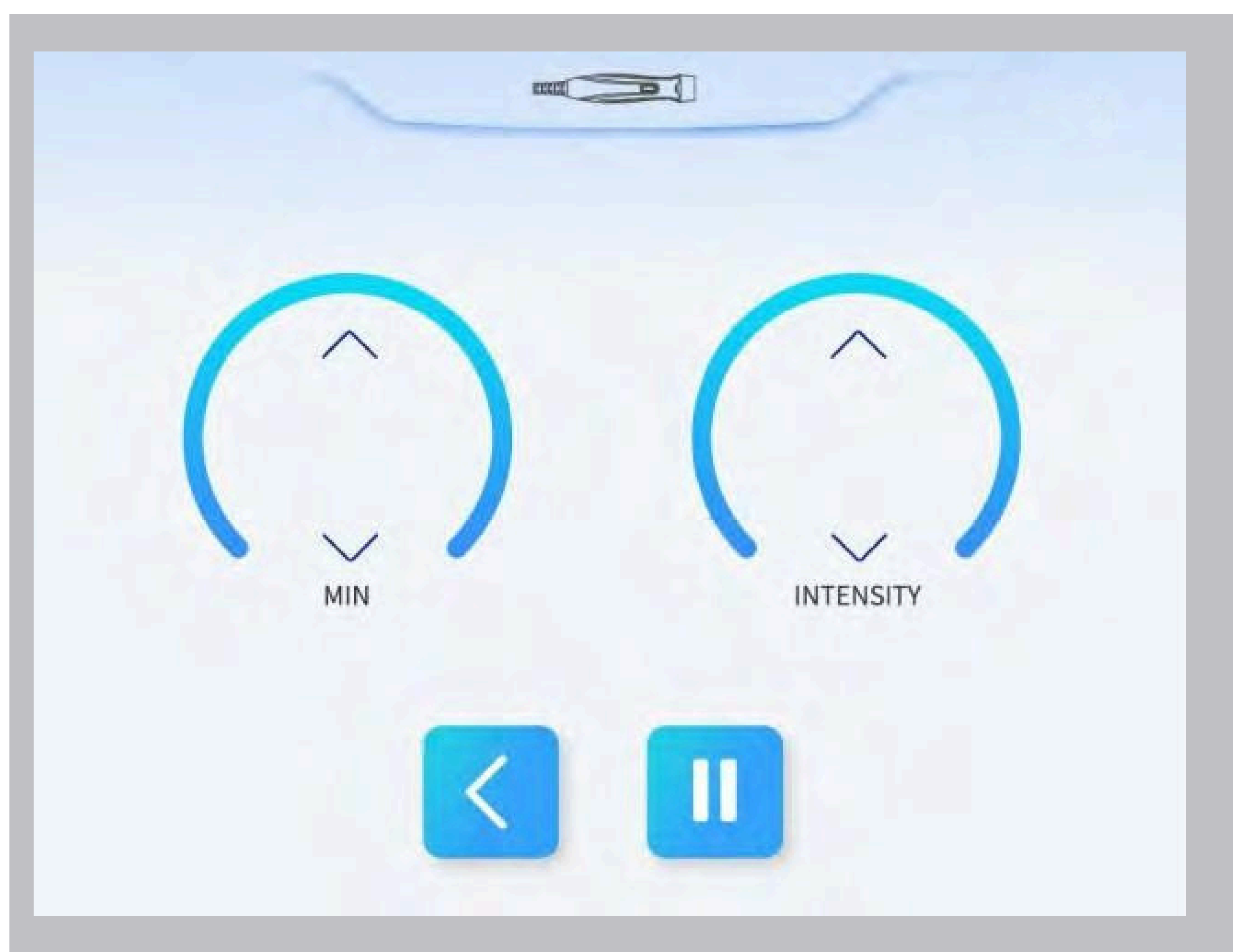

Procedura działania:

1. Na panelu sterowania wybierz odpowiednią głowicę.
2. Strzałkami w górę i w dół dostosuj czas zabiegu oraz intensywność.
3. Przesuwaj głowice delikatnie po skórze albo prowadź ją ruchami stemplowymi.

Propozycje parametrów

Głowica	Intensywność	Tryb	Głębokość	Dozowanie	Szybkość	Czas
Peeling kawitacyjny	20	/	/	/	/	5-7
Vortex oczyszczanie wodorowe	/	/	/	/	/	5-7
Mezoterapia wysokociśnieniowa	/	Con	1.5-3	0.2-0.4	0.5	
Głowica RF	8-10		/	/	/	8-10
Ultradźwiękowa	2-5		/	/	/	3-5